

Hoe ga ik te werk?

Vorbereidende stappen en info

Dankjewel voor jouw deelname aan Leven in Leidingen!

Op de **voor- en achterkant van deze flyer** vind je alle instructies om stalen te nemen.

Lees alles zorgvuldig door **voordat je begint**.

Heb je liever een visuele uitleg? Bekijk dan het **instructiefilmpje**!

Bekijk het **instructiefilmpje** op www.uantwerpen.be/leven-in-leidingen/ of scan de QR-code:



Reken ongeveer **5 minuten** voor het nemen van één staal en het invullen van de bijhorende vragenlijst.

Neem de stalen bij voorkeur **na intensief gebruik van de lavabo en vóór het poetsen**.



Zorg ervoor dat de lavabo **niet extra gepoetst** wordt voor het nemen van de stalen, het is belangrijk om de afvoer te onderzoeken zoals hij is!



Inhoud van de envelop



Instructies staalname



Neem de ziplock-zakjes uit de envelop, maar houd ze nog gesloten.



Blauwe swab* (of "eNat") om het bovenste deel van de afvoer van de lavabo te bemonsteren.



Vragenlijst per staal



Absorberend papier om eventuele lekkende vloeistof op te vangen.

* Wees voorzichtig: de vloeistof in het buisje mag niet in contact komen met de huid of ogen. Is er toch contact, raadpleeg dan een arts. Houd het buisje buiten bereik van kinderen.

Was je handen vóór je begint. Let op, gebruik hiervoor niet de lavabo waarvan je een staal neemt!

AFVOER LAVABO



- 1 Zet een timer van 30 seconden klaar.



- 2 Indien mogelijk: haal de afvoerstop uit de lavabo.



- 3 Open het plastic ziplock-zakje van **staal 1 - lavabo** en neem het buisje eruit. Draai de blauwe dop van het buisje en zet het buisje dan veilig weg zodat het niet kan omvallen.



- 4 Haal het wattenstaafje uit de verpakking zonder het gedeelte onder het rode lijntje aan te raken.

- 5 Start de timer en breng het wattenstaafje via het putje zo diep mogelijk in de afvoer. Wrijf de swab gedurende 30 seconden langs de binnenkant van de afvoer terwijl je hem ronddraait. **Duw niet te hard** en **hou het wattenstaafje goed vast** zodat het niet in de afvoer valt.




- 6 Haal het wattenstaafje na 30 seconden weer uit de afvoer, plaats het staafje in het buisje en breek het bij de rode lijn af door het staafje voorzichtig te buigen.



- 7 Sluit het buisje goed af met de dop. Leg het buisje in het ziplock-zakje met absorberend papier.

- 8 Vul de **vragenlijst voor lavabo - staal 1** (voor- en achterzijde) in en steek deze mee in het zakje.

- 9 Herhaal deze stappen voor de stalen van de overige lavabo's.

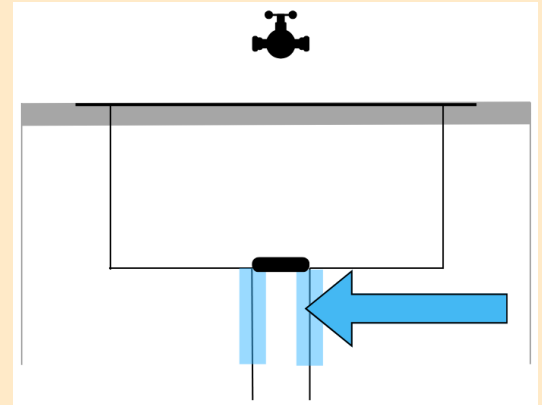

STALEN BEWAREN



Bewaar de stalen **in de koelkast** tot ze naar het labo vertrekken.