


ÉTAPE 8




Lavez-vous les mains.

ÉTAPE 9

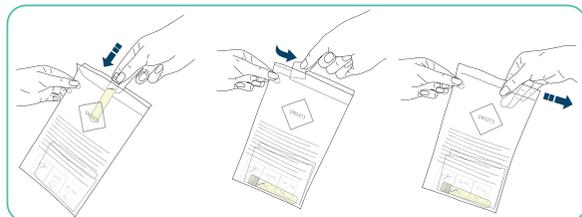

- Placez le tube dans la pochette de sécurité transparente.
- Laissez le chiffon blanc en place.
- Fermez la pochette. Enlevez la bande et collez la pochette.


ÉTAPE 10

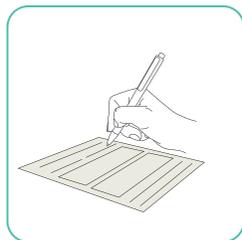

- Inscrivez sur le formulaire de participation :
 - vos coordonnées
 - la date de prélèvement de l'échantillon
 - les coordonnées de votre médecin (traitant)

Attention ! Si vous ne remplissez pas correctement le formulaire de participation, vous ne recevrez aucun résultat.

ÉTAPE 11

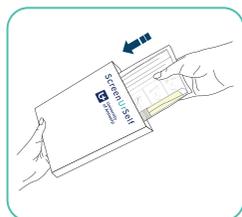


Placez la pochette de sécurité transparente contenant votre échantillon et le formulaire de participation complété dans la boîte en carton.

ÉTAPE 12



Insérez la boîte en carton remplie dans l'enveloppe supplémentaire. Sur l'enveloppe figure l'adresse du laboratoire. Vous ne devez **pas** coller de timbre.

ÉTAPE 13

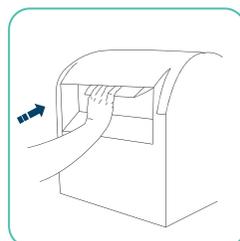

Envoyez l'enveloppe dès que possible. Vous ne pouvez pas envoyer votre échantillon tout de suite ? Vous pouvez dans ce cas le conserver à température ambiante pendant deux jours maximum.



Colli-Pee® a été conçu par Novosanis NV/SA.



Novosanis NV/SA
medical device company
Bijkhoevelaan 32c · B-2110Wijnegem, Belgique
welcome@novosanis.com
Filiale d'Orasure Technologies, Inc.

Vous pouvez également lire ces informations en français, anglais, turc, arabe, polonais, roumain et russe :

Je kan deze info ook lezen in het Nederlands op:

You can also read the info in English on:

Bilgileri Türkçe olarak şu adresten de okuyabilirsiniz:

يلع في زي لجنلة الة للاب زرفوت مر تامل عمل الة ذة" في ب رة ة مر جرت

Z tymi informacjami możesz zapoznać się w języku polskim na stronie:

Puteți citi informațiile și în limba română la adresa:

Эта информация также доступна на русском языке на сайте:

www.ScreenUrSelf.be



ScreenUrSelf

COMMENT FAIRE POUR PRÉLEVER SOI-MÊME UN ÉCHANTILLON ?



Suivez ces instructions d'utilisation. Vous pouvez également regarder une vidéo sur www.ScreenUrSelf.be/hoe-moet-ik-een-staal-nemen-urine



Lisez tout d'abord ceci :

- **Vous seule** êtes habilitée à utiliser ce kit de dépistage. Le code du kit est lié à votre nom. Vérifiez que votre nom est correct sur la lettre.
- Conservez toujours le kit à **température ambiante**. Avant et après utilisation.
- N'utilisez le kit qu'une seule fois.
- Vous avez prélevé un échantillon ? Envoyez-le le plus rapidement possible. **Au plus tard deux jours après utilisation**. N'envoyez **pas** votre échantillon un vendredi ou la veille d'un jour férié. Sinon, il restera trop longtemps dans la boîte aux lettres.
- Arrêtez la prise de **produits vaginaux** (pommades, crèmes, etc.) deux jours avant le prélèvement de l'échantillon. Que pouvez-vous encore utiliser ?
 - contraception vaginale
 - préservatifs
 - un lubrifiant à base d'eau
- Ne lavez **pas** votre vagin en profondeur avant de prélever l'échantillon. Sinon, vous ne pourrez pas récolter suffisamment de sécrétions.
- Prélevez l'échantillon au moins **une heure** après être allée aux toilettes pour la dernière fois.



www.ScreenUrSelf.be

Quand ne faut-il pas prélever d'échantillon ?

- Ne prélevez pas d'échantillon s'il fait **plus de 25 degrés**.
- Ne prélevez pas d'échantillon s'il **gèle**.
- Ne prélevez pas d'échantillon pendant vos **règles** ou dans les trois jours qui suivent.
- Ne prélevez pas d'échantillon si vous êtes **enceinte**.
- Ne prélevez pas d'échantillon dans les six semaines qui suivent un **accouchement**.
- Ne prélevez pas d'échantillon si l'emballage est **endommagé**.
- Ne prélevez pas d'échantillon si la **date de péremption** est dépassée. Cette date figure sur l'emballage.

Dans l'enveloppe, vous trouverez :

- une **lettre**
- le **formulaire de participation** : il se trouve au verso de la lettre
- un **dépliant** avec des informations complémentaires
- une **pochette de sécurité** : une pochette transparente contenant un chiffon blanc rectangulaire
- une **enveloppe** supplémentaire pour renvoyer gratuitement votre échantillon
- un sachet contenant le **matériel de prélèvement Colli-Pee**
- des **instructions** pour prélever l'échantillon : vous les trouverez ci-dessous


QU'EST-CE QUE LE COLLI-PEE ?

Colli-Pee est un petit dispositif qui collecte la première partie de l'urine. Cette partie de l'urine contient les sécrétions du vagin, de l'utérus et du col.

Dans cette partie de l'urine, nous pouvons contrôler si vous êtes infectée par le virus qui peut causer le cancer du col de l'utérus (papillomavirus humain ou HPV).

À quoi ressemble le Colli-Pee ?

- Le Colli-Pee se trouve dans une pochette transparente. **I.**
- Dans cette pochette, vous trouverez :
 - une **urinette Colli-Pee**

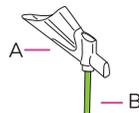


· un petit tube rempli d'un agent conservateur **II.**

Dessin II. : · C. capuchon

- D. tube
- E. agent conservateur


L'agent conservateur doit rester dans le tube. Ne buvez pas l'agent conservateur !

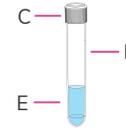

COMMENT PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON ? ÉTAPE PAR ÉTAPE.

Conseil ! Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant de commencer.



ÉTAPE 1

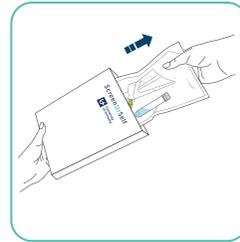

- Sortez la pochette transparente contenant le Colli-Pee de la boîte en carton.
- Conservez la boîte en carton. Vous en aurez besoin pour envoyer votre échantillon.


Attention ! Prélevez l'échantillon au moins une heure après être allée aux toilettes pour la dernière fois.

ÉTAPE 2

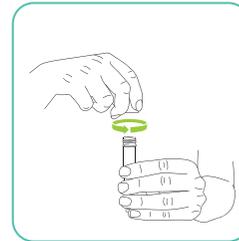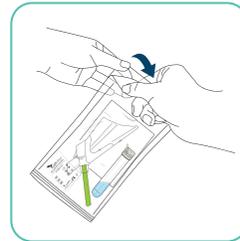


- Retirez l'urinette et le tube de l'emballage.
- Dévissez le capuchon du tube.

ÉTAPE 3

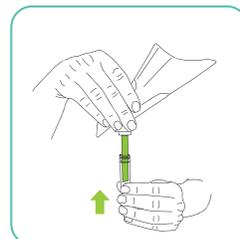


Fixez le tube sur l'urinette.

ÉTAPE 4

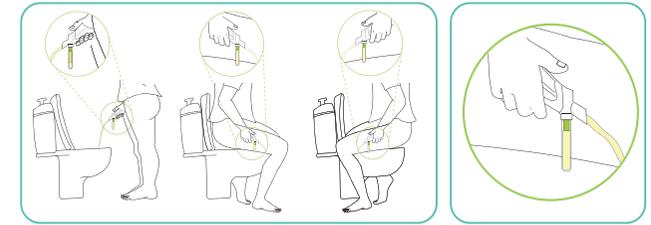

- Asseyez-vous sur la cuvette des toilettes. Ou tenez-vous debout devant les toilettes.
- Urinez dans l'urinette. Le dispositif récolte la bonne quantité d'urine. Vous ne devez **pas** arrêter d'uriner lorsque le tube est rempli. L'urine qui ne rentre plus dans le tube s'écoulera de l'autre côté de l'urinette dans les toilettes.

ÉTAPE 5

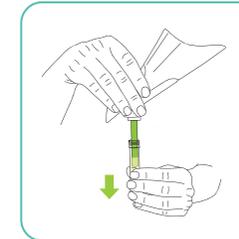


Enlevez le tube de l'urinette.

ÉTAPE 6



Fermez bien le tube. Vous devez revisser correctement le capuchon.

ÉTAPE 7

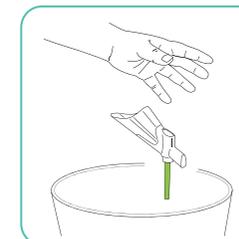

Jetez l'urinette dans la poubelle des déchets PMC.