

Когда не следует брать образцы?

- Не выполняйте взятие образцов при температуре выше 25 градусов.
- Не выполняйте взятие образцов на морозе.
- Не выполняйте взятие образцов во время месячных или в течение трех дней после них.
- Не выполняйте взятие образцов, если вы беременны.
- Не выполняйте взятие образцов в течение шести недель после родов.
- Не выполняйте взятие образцов, если повреждена упаковка.
- Не выполняйте взятие образцов после истечения срока годности. Срок годности указан на упаковке.

Внутри конверта содержатся:

- **письмо**
- **форма заявки на участие:** на обратной стороне письма
- **брошюра** с дополнительной информацией
- **защитный пакет:** прозрачный пакет, содержащий:
 - прямоугольную вставку из ткани белого цвета
- дополнительный **конверт** для бесплатного возврата образца
- пакет с **устройством для взятия образца: щеткой Evalyn**
- **инструкция по применению** для взятия образца: см. ниже

ЧТО ТАКОЕ ЩЕТКА EVALYN?

Щетка Evalyn – это небольшое устройство для сбора выделений из влагалища, матки и шейки матки. При помощи щетки можно взять образцы этого материала. Путем анализа этого материала можно определить, заражены ли вы вирусом, который может вызвать развитие рака шейки матки (вирус папилломы человека, или ВПЧ).

Как выглядит щетка Evalyn?

- В упаковке находится одна **щетка** (щетка Evalyn).
- Щетка состоит из прозрачного корпуса с крылышками.
 - С одной стороны на корпус надевается розовый колпачок.
 - На другой стороне находится розовый поршень.
 - Под розовым колпачком находится белая щетка.




КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦА? ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

Совет! Перед началом процедуры внимательно ознакомьтесь с инструкцией.




ШАГ 1

Сначала вымойте руки с мылом.

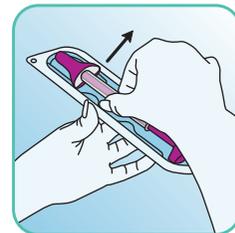

ШАГ 2

- Извлеките набор из упаковки.
- Сохраните упаковку. Она понадобится для отправки образца.

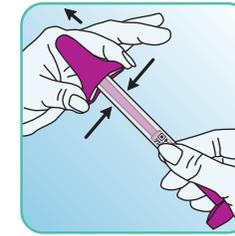

ШАГ 3


- Возьмитесь большим и указательным пальцами за края розового колпачка и снимите его. Не выдвигайте щетку наружу.
- Сохраните розовый колпачок. Он понадобится для отправки образца.

Внимание! Не прикасайтесь руками к белой щетке. Это может привести к искажению результата анализа.




ШАГ 4

Примите удобное положение или сядьте на унитаз. Например, как для введения тампона.

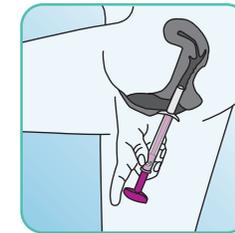


ШАГ 5

- Одной рукой раздвиньте половые губы.
- Другой рукой введите верхнюю часть корпуса во влагалище до касания крылышками половых губ.

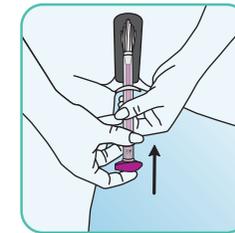

ШАГ 6

- Одной рукой возьмитесь за прозрачный корпус снизу.
- Нажмите на розовый поршень. Нажимайте до тех пор, пока он не упрется в прозрачный корпус и не сможет двигаться дальше. При этом щетка выдвигается из корпуса. Когда она выдвинется в заданное положение, вы услышите щелчок.

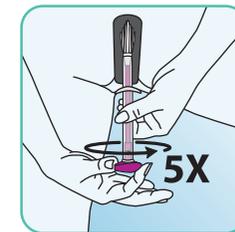

ШАГ 7

- Поверните розовый поршень пять раз в одном направлении. После каждого оборота вы услышите или почувствуете щелчок. Щетка при этом поворачивается.
- После пяти оборотов извлеките корпус из влагалища.