

Când nu este indicat să recoltați o probă?

- Nu recoltați nicio probă dacă **este mai cald de 25 de grade.**
- Nu recoltați nicio probă dacă este **ger.**
- Nu recoltați nicio probă în perioada **menstruației** sau în decurs de trei zile după menstruație.
- Nu recoltați nicio probă dacă sunteți **însărcinată.**
- Nu recoltați nicio probă în decurs de șase săptămâni de când ați **născut.**
- Nu recoltați nicio probă dacă ambalajul este **deteriorat.**
- Nu recoltați nicio probă după **data de expirare.** Această dată este indicată pe ambalaj.

În plic veți găsi:

- o **scrisoare**
- **formularul de participare:** îl veți găsi pe spatele scrisorii.
- un **pliant** cu informații suplimentare
- o **pungă de siguranță:** o pungă translucidă care conține:
 - o bucată de material textil dreptunghiular, albă
- un **plic** suplimentar pentru a vă trimite gratuit proba
- o pungă cu **materiale pentru recoltarea unei probe: Evalyn Brush**
- **indicații de utilizare** pentru recoltarea probei: le puteți vedea mai jos


CE ESTE EVALYN BRUSH?

Evalyn Brush este un mic dispozitiv care colectează secrețiile din vagin și uter (colul uterin). Folosiți periuța pentru a desprinde aceste secreții. Din aceste secreții putem vedea dacă aveți o infecție cu virusul care poate cauza cancerul de col uterin (virusul papiloma uman sau HPV).

Cum arată Evalyn Brush?

În ambalaj găsiți o **periuță** (Evalyn Brush).

- Periuța este formată dintr-un manșon transparent cu aripioare.
- Pe o parte a manșonului este fixat un capac roz.
- Pe cealaltă parte se află o rotiță roz.
- Sub capacul roz există o periuță albă.

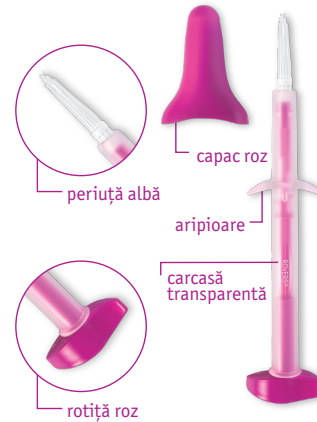


CUM SE RECOLTEAZĂ O PROBĂ? PAS CU PAS.

Sfat! Citiți instrucțiunile în întregime înainte de a începe.




PASUL 1

Spălați-vă mai întâi pe mâini cu apă și săpun.

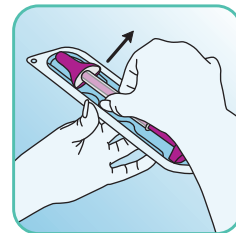

PASUL 2


- Scoateți trusa din ambalaj.
- Păstrați ambalajul. Aveți nevoie de aceasta pentru a vă trimite proba.

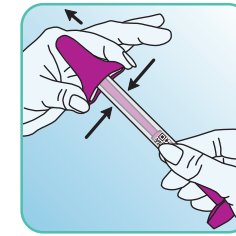

PASUL 3


- Apăsați cu degetul mare și arătătorul pe părțile laterale ale capacului roz și îndepărtați-l. **Nu** apăsați periuța în interior.
- Păstrați capacul roz. Acesta este necesar pentru trimiterea probei recoltate.

Atenție! Nu atingeți periuța albă cu mâinile. Acest lucru poate influența rezultatul testului.

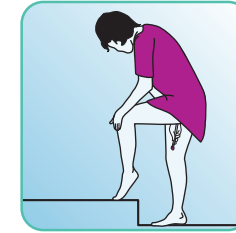


PASUL 4

Stați într-o poziție confortabilă sau așezați-vă pe toaletă. De exemplu, ca și cum ați introduce un tampon.

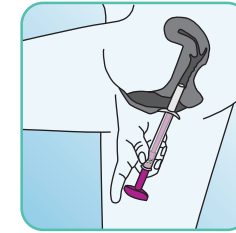


PASUL 5

- Cu o mână, depărtați-vă labiile.
- Cu cealaltă mână, introduceți partea superioară a manșonului în vagin până când aripioarele apasă pe labiile vaginale.

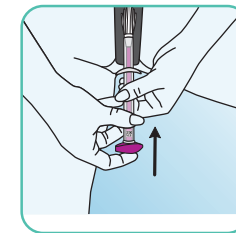

PASUL 6

- Cu o mână, țineți manșonul transparent în partea de jos.
- Apăsați pe roțița roz. Împingeți până când aceasta atinge manșonul transparent și nu mai poate merge mai departe. Periuța iese apoi din manșon. Veți auzi sau simți un declic atunci când este corect.

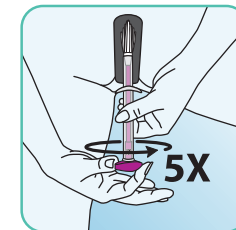

PASUL 7

- Rotiți roțița roz de cinci ori în aceeași direcție. După fiecare rotație, se aude sau se simte un declic. Periuța se rotește.
- Scoateți manșonul din vagin după cinci rotații.